

Guia do Utilizador Hospitalar

Sistema de Telemonitorização de Insuficiência Cardíaca

Introdução a dizer variáveis e equipamentos usados

Configuração Inicial


1. Ligar os dispositivos
 - a. Telemóvel – Premir prolongadamente o botão assinalado




- b. Relógio – Premir prolongadamente o botão assinalado



- c. Faixa – colocar o interruptor na posição de Ligar

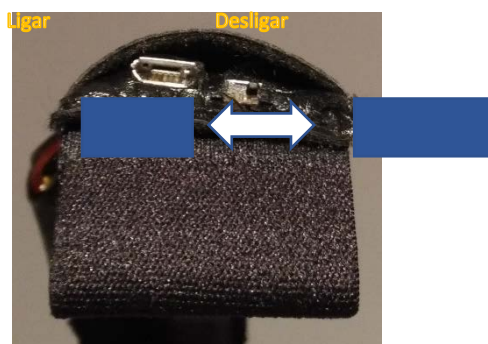

2. Clicar no icon  do relógio
3. Criar a ficha do doente na plataforma
 - a. Iniciar Sessão




TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO


Utilizador: Password:


☐ Lembrar-me? [Recuperar password](#)


b. Clicar em “Doentes”



TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO

 **Doentes**

 **Pesquisas**

 **Gestão**

[TERMINAR SESSÃO](#) [VOLTAR ATRÁS](#)

c. Clicar em “Criar Ficha”



TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO

Pesquisa Doentes

Filtrar por: Nome

Nº Doente	Nome	Morada	Data Nasc.	Sexo	Nº Utente	Falecido	Ficha	Monitorização
1	Doente Teste		01-01-1901	F		<input type="checkbox"/>		
2	Doente Teste 2		01-01-1901	F		<input type="checkbox"/>		
3			02-08-1945	M	12002006	<input type="checkbox"/>		

[TERMINAR SESSÃO](#) [VOLTAR ATRÁS](#)

d. Introduzir os dados do paciente



**TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO**

N. Doente: n/d
Nome: n/d
Sexo: n/d
Dt. Nascimento: n/d
Diagnósticos: (sem diagnósticos)

Ficha do Doente :: Dados Doente

Dados Doente | Informação Clínica | Diagnósticos | Oxigenoterapia | Ventilação | Alertas | Mensagens | Equipamentos | Monitorização

N. Doente: **N. Utente:**
Nome: **Dt. Nasc:** **Sexo:** **Estado:** **Telef.:**
Morada: **Localidade:** **Cod. Postal:** **Localidade:** n/d
Observações:


GUARDAR

TERMINAR SESSÃO VOLTAR ATRÁS

4. Adicionar os dispositivos no separador “Equipamentos” (POR ESTA ORDEM)

- GearS3
- BITalino Plux
- Telemóvel

b. Escolher o tipo de dispositivo a adicionar



**TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO**

N. Doente: 1
Nome: Doente Teste
Sexo: Feminino
Dt. Nascimento: 01-01-1901 (116 anos)
Diagnósticos: (sem diagnósticos)

Ficha do Doente :: Equipamentos


Dados Doente | Informação Clínica | Diagnósticos | Oxigenoterapia | Ventilação | Alertas | Mensagens | **Equipamentos** | Monitorização

Procurar por Tipo de Equipamento: **Descrição:** ☒ Filtrar indisponíveis

Código	Equipamento	Associado ao Doente	Data Associação	Associar
4	Samsung J5 2	--	--	<input button"="" text"="" type="button" value="+</input></td></tr> </tbody> </table> <div> Equipamentos Associados ao Doente:
 <input type="/> O doente não possui equipamentos.

TERMINAR SESSÃO VOLTAR ATRÁS

c. Adicionar o dispositivo



TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO

N. Doente: 1
Nome: Doente Teste
Sexo: Feminino
Dt. Nascimento: 01-01-1901 (116 anos)
Diagnósticos: (sem diagnósticos)

Ficha do Doente :: Equipamentos

Dados Doente | Informação Clínica | Diagnósticos | Oxigenoterapia | Ventilação | Alertas | Mensagens | Equipamentos | Monitorização

Procurar por Tipo de Equipamento: Telemóvel Descrição: ☒ Filtrar indisponíveis

Equipamentos Associados ao Doente:


O doente não possui equipamentos.

TERMINAR SESSÃO VOLTAR ATRÁS

5. Colocar os dispositivos no doente

- Telemóvel dentro da bolsa que fica a cintura, o cinto que suporta a bolsa deve estar justo de forma a que não oscile
- Relógio deve estar justo à pele do paciente (na posição habitual de um relógio na mão **NÃO DOMINANTE**)
- Faixa deve ter a etiqueta com o numero centrada no externo do doente, com o numero na posição correta para quem olha para o doente

Carregamento

- De 12 em 12 horas é necessário carregar o relógio e o power bank que acompanha o telemóvel, não é necessário desligar o relógio durante o carregamento
- Os dispositivos carregam durante aproximadamente 2h
- Após o carregamento é necessário voltar a colocar o relógio, e caso este se tenha desligado deve-se voltar a ligar o relógio sendo necessário voltar a clicar no icon 
- Após o carregamento do power bank, este deve ser ligado ao telemóvel
- Quando o power bank estiver ligado ao telemóvel e o LED do power bank se apagar deve voltar a carregar-se o power bank (isto ocorre cerca de 1h depois de se ligar o power bank ao telemóvel)

Visualização de dados

1. Iniciar Sessão



TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO

Utilizador:

Password:

☐ Lembrar-me? [Recuperar password](#)

2. Clicar em “Doentes”



3. Clicar em “Monitorização”



TELEMONITORIZAÇÃO DE
OXIGENOTERAPIA
DE LONGA DURAÇÃO

Pesquisa Doentes

Filtrar por: Nome PESQUISAR

Nº Doente	Nome	Morada	Data Nasc.	Sexo	Nº Utente	Falecido	Ficha	Monitorização
1	Doente Teste		01-01-1901	F		<input type="checkbox"/>		
2	Doente Teste 2		01-01-1901	F		<input type="checkbox"/>		
3			02-08-1945	M	12002006	<input type="checkbox"/>		

criar ficha

TERMINAR SESSÃO VOLTAR ATRÁS

4. Definir o intervalo de tempo desejado

